


攪拌羽根

処理するサンプルの種類や処理量に応じた攪拌羽根をご用意しております。(HM、HFM、SHFM 共に攪拌羽根は同じものを使用しておりますが、カッター軸など他部分については、全く違うものとなります。ご注意ください)

50～100φ 6枚羽根型 (剪断用)

6枚の鋭利な羽根を高速回転させることにより、処理液に高剪断力を与えると同時に強力な衝突力による分散・乳化・攪拌・混合に適しています。比較的低粘度の処理液向きです。

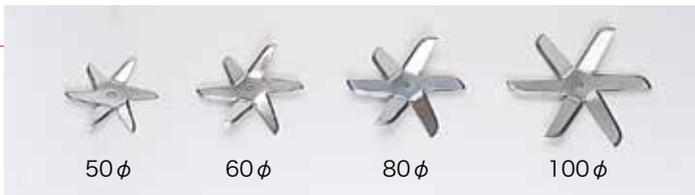


セラミックコーティング、テフロンコーティング等の加工も可能です。材質もSUS304、316、SK等各種ご用意できます。



30～120φ 丸羽根型 (攪拌用)

上下に刃を立てた丸型の円板を高速回転することで上側から下側への対流を発生させ、分散・乳化・攪拌・混合等を行います。高粘度の処理液向きです。

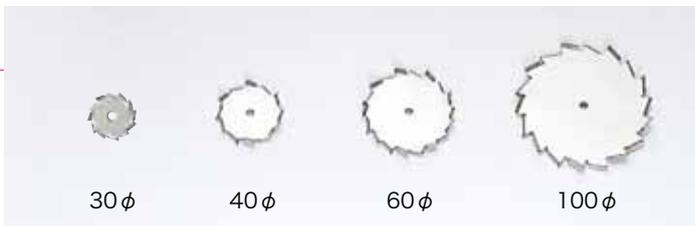

シャフト装着時



攪拌タンク

ご使用になる処理量に応じて、各サイズのタンク（タンクの材質は、SUS304、316、テフロンコーティング等）をご用意しております。2重構造のジャケット付タンクもご用意できます。特注品も承りますのでご相談ください。

